



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder  
www.rehagrip.at



Typ 2

**Duschklappsitz**

**A 153.5**

**A 15350**

Bestellnummern:

GLATT  
538601

GLATT COLOR  
538313

Belastbarkeit: **150 kg**


Werkstoff: **Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810)**, 8% Chrom, 10% Nickel  
Hierbei handelt es sich um einen austenitischen (rostfreien) Cr-Ni-Stahl der eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Nässe und Witterungseinflüsse, eine hohe Belastbarkeit und Formstabilität vorweist. Dieses Material ist leicht zu reinigen und Desinfektionsmittelbeständig.

Die Abdeckkappen werden aus **PA6 – Polyamid 6** oder **PC-ABS Bayblend T45 PG** hergestellt.

Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus, besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit (keine Säuren) und verfügen bei tiefen Temperaturen bis  $-40^{\circ}\text{C}$  über eine sehr gute Zähigkeit.

Das Sitzmodul besteht aus **Isplen PB 140 G2M**.

Maße: L-486 mm, H-200 mm, T-450 mm bzw. 188 mm,  
Sitzfläche 486 x 450 mm, Rohr  $\varnothing$  32 x 1,5 mm

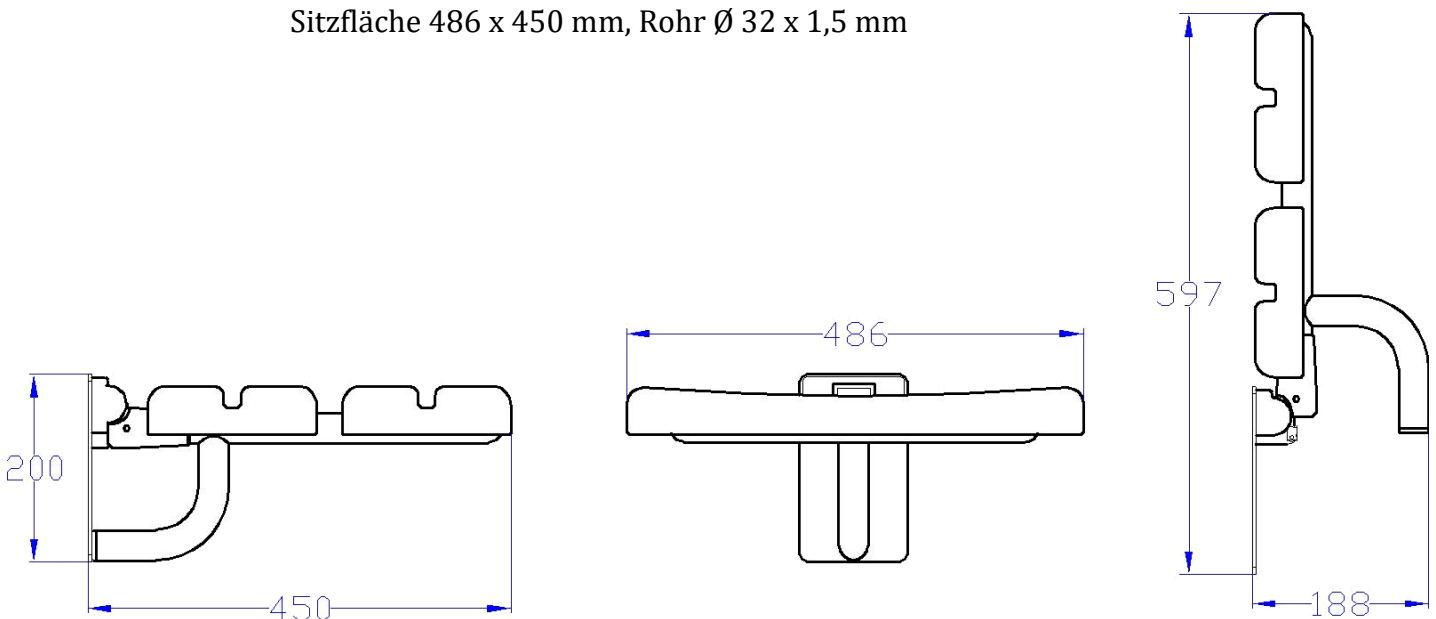

Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW



rehagrip


Produkte für barrierefreie Bäder  
www.rehagrip.at

### Ausschreibungstext:

Duschklapsitz ohne Rückenlehne zur Wandmontage aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm. Sitzfläche mit Gasdruckfederunterstützter Klappmechanik, selbstarretierend in waagrechter und senkrechter Stellung, mit kleiner Stütze zur Wand. Sitzfläche gefertigt aus Kunststoffmodulen, inkl. Befestigungsset.

### Ausführungen:

1. Glatte Oberfläche elektrolytisch electropoliert. Fabrikat: Rehagrip- Glatt
2. Glatte Oberfläche mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Fabrikat: Rehagrip- Color Glatt

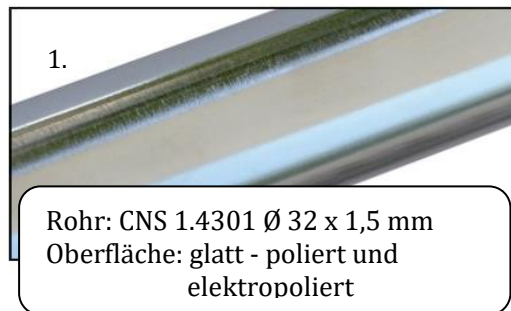

Die Bestellnummern und Typenbezeichnungen der div. Ausführungen entnehmen Sie bitte der Seite 1.



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW