



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder  
www.rehagrip.at



Typ 3

Duschklappsitz

A 153.5

A 15350

Bestellnummern:

GLATT  
538602

GLATT COLOR  
538314

Belastbarkeit: **250 kg**




Werkstoff: **Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810)**, 8% Chrom, 10% Nickel  
Hierbei handelt es sich um einen austenitischen (rostfreien) Cr-Ni-Stahl der eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Nässe und Witterungseinflüsse, eine hohe Belastbarkeit und Formstabilität vorweist. Dieses Material ist leicht zu reinigen und Desinfektionsmittelbeständig.

Die Abdeckkappen werden aus **PA6 – Polyamid 6** oder **PC-ABS Bayblend T45 PG** hergestellt.

Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus, besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit (keine Säuren) und verfügen bei tiefen Temperaturen bis  $-40^{\circ}\text{C}$  über eine sehr gute Zähigkeit.

Das Sitzmodul besteht aus **Isplen PB 140 G2M**.

Maße: L-486 mm, H-200 mm, T-450 mm bzw. 188 mm,  
Sitzfläche 486 x 450 mm, Rohr  $\varnothing$  32 x 1,5 mm

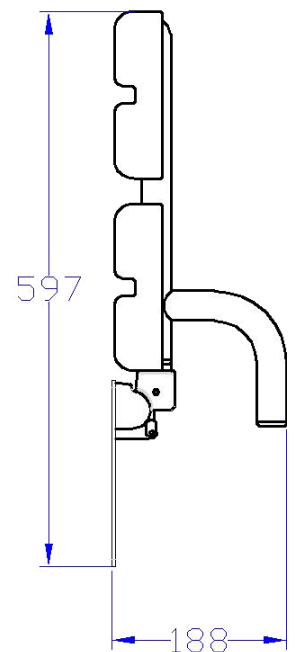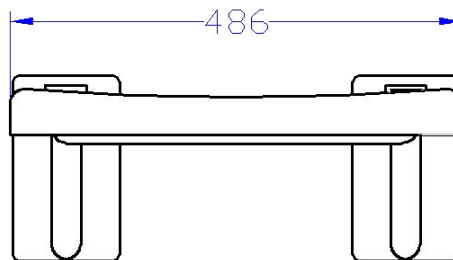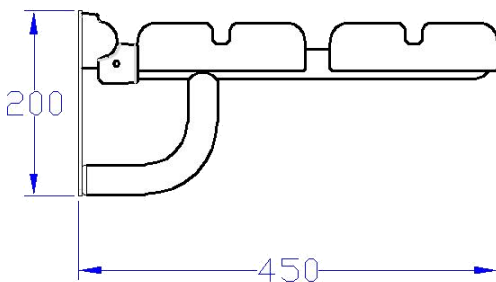

Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;


Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW

### Ausschreibungstext:

Duschklapsitz ohne Rückenlehne zur Wandmontage aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm. Sitzfläche mit Gasdruckfederunterstützter Klappmechanik, selbstarretierend in waagrechter und senkrechter Stellung, mit 2 Grundplatten, kleiner Stütze zur Wand. Sitzfläche gefertigt aus Kunststoffmodulen, inkl. Befestigungsset.

### Ausführungen:

1. Glatte Oberfläche elektrolytisch electropoliert. Fabrikat: Rehagrip- Glatt
2. Glatte Oberfläche mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Fabrikat: Rehagrip- Color Glatt

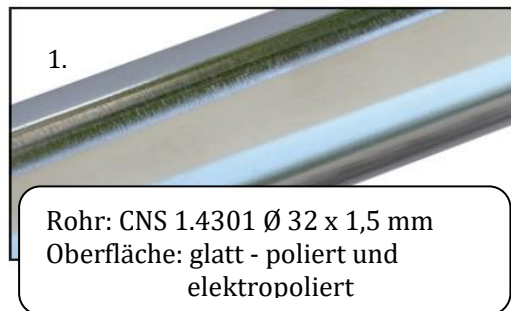

Die Bestellnummern und Typenbezeichnungen der div. Ausführungen entnehmen Sie bitte der Seite 1.